

BioSimil
AESTHETICS

PROSHOCK
ice

*B o d y w a v e
C o u n t o u r i n g*

Adiposidad, Celulitis, Tonificación

TODO EN UNO

PROMOITALIA
MEDICAL AESTHETICS

Proshock Ice Microwave

Bodywave Countouring




Proshock Ice MW es un dispositivo no invasivo, indoloro y completamente seguro para redefinir y modelar el cuerpo.

- ▶ Especialmente indicado para el tratamiento de:
- **Grasa localizada**
- **Eliminación de celulitis**
- **Tonificación, firmeza y modelación**

UTILIZA 3 TECNOLOGÍAS COMBINADAS

1 **MicroWave Ice** Microondas Frías Superficiales y Profundas

- ▶ Su característica fundamental es la de transmitir energía a las moléculas, provocando su vibración y aumentando así, su temperatura. La energía se transfiere rápidamente a las moléculas polares, como el agua, y más lentamente a las moléculas no polares, como los triglicéridos y los ácidos grasos.
- ▶ Si se utiliza sobre el tejido adiposo, las microondas penetran hasta 3-5 cm de profundidad, vibrando las células grasas y provocando que el contenido lipídico se escape de la célula (exocitosis lipídica).
- ▶ Una característica fundamental es la de estar equipado con dos piezas manuales que transmiten frío, contrastando el efecto de calor de la superficie creado por las microondas.

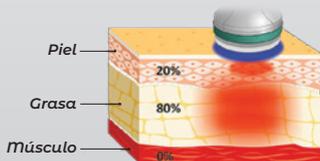

2 **Cryo Switch** Crioterapia para tonificación vascular

- ▶ La acción de calor profundo que transmite la pieza manual de microondas llega a la dermis para estimular a los fibroblastos a producir colágeno, elastina y nueva matriz extracelular, de forma continua y duradera.
- ▶ Los resultados son visibles de inmediato y duran unos meses después del tratamiento.
- ▶ La temperatura epidérmica en la zona tratada se mantiene en el rango de 0-2 °C, mientras que a una profundidad de 4 a 7cm alcanza los 50 °C.
- ▶ Durante la emisión de las microondas, la pieza manual realiza su efecto de crioterapia enfriando rápidamente el tejido de la superficie. Esto determina una vasoconstricción superficial que contrasta con la vasodilatación térmica profunda; un efecto frío y calor que activa la circulación y mejora el tono de la piel.

3 **Echo Shock** la onda de choque resonante

- ▶ Las piezas manuales con las que está equipado el Proshock Ice MW han sido diseñadas con un innovador sistema que permite tratar la piel tras la emisión de microondas.
- ▶ La pieza manual de Echo Shock utiliza la emisión de una onda de choque dentro de una cámara de resonancia. La pieza succiona la piel creando una cámara vacía que amplifica el efecto de la onda de choque, aumentando su efectividad.
- ▶ Las ondas de choque reducen la tensión de las bandas fibrosas, eliminan el efecto piel de naranja, aumentan la estimulación de los fibroblastos aumentando así el efecto estimulante y tonificante, pero, sobre todo, catalizan el efecto de eliminación de triglicéridos y ácidos grasos escapados de las células grasas, con la acción de las microondas.

Tecnología Catalizadora

No es la crioterapia clásica, no es una simple onda de choque, no solo son microondas, sino la **Tecnología Catalizadora Siege**.

La acción combinada de las tres tecnologías hace que el contenido de lípidos se escape de los adipocitos. Fisiológicamente, las células de macrófagos se activan y corren alrededor de los adipocitos dañados, asediándolos.

El efecto es rápido y se produce de 4/6 horas después del tratamiento.

