

BioSimil

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS

ARTISENTIAL

LA MÁXIMA
INNOVACIÓN EN
INSTRUMENTAL
DE CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA.
MOVIMINETO
ARTICULADO
360 GRADOS.


LIV'SMED



reddot award
product design

/ Presentamos **ArtiSential®**

EL TERMINAL DE DOBLE ARTICULACIÓN
ArtiSential PERMITE ALCANZAR CON PRECISIÓN
ZONAS QUIRÚRGICAS COMPLEJAS Y DE
DIFÍCIL ACCESO.

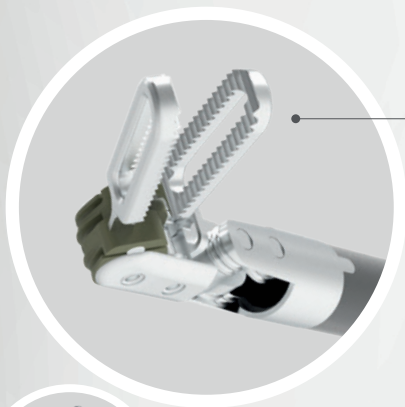

/ Terminal Multiarticulado

- Con 7 grados de libertad, proporciona diversos ángulos de aproximación a la zona quirúrgica



/ Eje

- Disponible en 2 tamaños (25cm y 38cm)

LIV'SMED

ARTISENTIAL
Instrumentos Laparoscópicos Articados

/ Anillos de Control

- Permiten abrir y cerrar la pinza con movimientos del pulgar y el índice.
- Diseño ambidiestro.

/ Electrodo

- Bipolar o Monopolar, según el modelo del producto.

/ Palanca de Bloqueo (opcional)

- Desactiva la doble articulación del terminal.
- Mantiene la función Abrir / Cerrar.

/ Anillos de control ajustables con Velcro (opcional)

- Las cintas con Velcro ajustan los anillos de control a los dedos del usuario
- Proporcionan un control cómodo y personalizado.

/ Diseño Ergonómico

- Control intuitivo de la articulación.

/ Mango

- Diseñado para adaptarse a diversos tamaños de mano.







LIV'SMED

ARTISENTIAL
Instrumentos Laparoscópicos Articulados

/ Interfaz Sincronizada


El terminal **ArtiSential** cuenta con dos articulaciones que permiten efectuar movimientos verticales y horizontales en perfecta sincronización con las manos del usuario. Gracias a su sistema multigrado el usuario podrá realizar movimientos complejos en una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos.

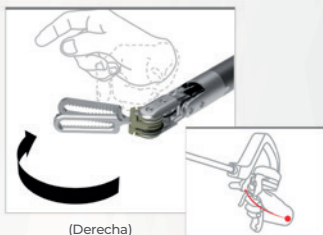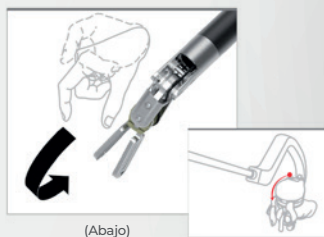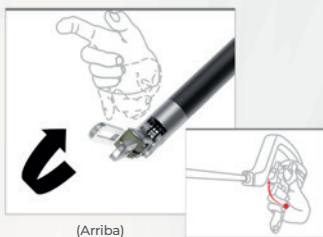

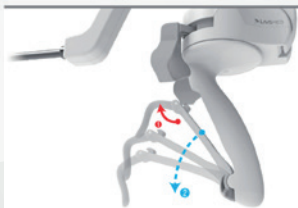

Tire de la **palanca 1** hacia afuera.
La **palanca 2** baja y se activa el bloqueo.

ACTIVAR LA FUNCIÓN DE BLOQUEO

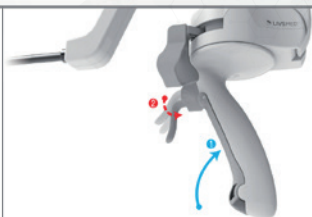

Presione la **palanca 1** hacia adentro hasta que la **palanca 2** haga "clic" y desactive el bloqueo.


DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE BLOQUEO



Articulación Derecha / Izquierda
(bloqueada)



Articulación Arriba / Abajo
(bloqueada)

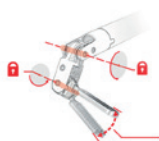

Abrir / Cerrar

Cuando se activa la función de bloqueo, las articulaciones ARRIBA / ABAJO y DERECHA / IZQUIERDA quedan fijas y sin movimiento, pero sigue siendo posible la acción de ABRIR / CERRAR el terminal.



LIV'SMED

ANILLOS DE CONTROL AJUSTABLES CON VELCRO

*opcional, a pedido



Ajuste las cintas de Velcro de los anillos de control al tamaño de sus dedos. Le brindarán un agarre más firme y un manejo cómodo y sencillo del terminal.

/Articulación sin complicaciones

En todo momento, en todo lugar. Eliminamos la necesidad de reservar y esperar equipos específicos. Nuestra línea de productos se puede utilizar en el entorno quirúrgico existente sin dispositivos adicionales, sistemas complejos o accesorios especiales. **ArtiSential** puede entrar en funcionamiento de manera inmediata.



Articulación con feedback táctil

ArtiSential ofrece las ventajas de los instrumentos articulados sin perder sensación táctil, la cual es esencial para aplicar la presión adecuada al trabajar con tejidos delicados.



Flexibilidad de acceso

El terminal de doble articulación ArtiSential ofrece varios ángulos de aproximación a la zona quirúrgica con 7 grados de libertad. Esto permite mejor acceso a una diversidad de estructuras anatómicas.



Interfaz ergonómica

ArtiSential presenta su nuevo mango de precisión que sincroniza el terminal con los movimientos de la mano y muñeca del usuario, ofreciendo comodidad en el control y un manejo intuitivo del instrumento.



Completa línea de productos articulados

Continuamos ampliando nuestra variada gama de instrumentos para satisfacer la necesidad de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y de alta precisión.

/ Instrumentos ArtiSential®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD PINZA
--------	-------------	----------------

▶ Pinza Fenestrada Bipolar



ABF01-L	Pinza fenestrada bipolar-38cm- Bloqueo	18 mm
ABF01-LV	Pinza fenestrada bipolar-38cm-Bloqueo/Ajustable	
ABF01S-L	Pinza fenestrada bipolar-25cm- Bloqueo	
ABF01S-LV	Pinza fenestrada bipolar-25cm-Bloqueo/Ajustable	

▶ Disector Bipolar Maryland



ABD01-L	Disector bipolar Maryland-38cm- Bloqueo	20 mm
ABD01-LV	Disector bipolar Maryland-38cm-Bloqueo/Ajustable	
ABD01S-L	Disector bipolar Maryland-25cm- Bloqueo	
ABD01S-LV	Disector bipolar Maryland-25cm-Bloqueo/ Ajustable	

▶ Disector Bipolar de Precisión



ABD02-L	Disector bipolar de precisión-38cm- Bloqueo	17 mm
ABD02-LV	Disector bipolar de precisión-38cm-Bloqueo/ Ajustable	
ABD02S-L	Disector bipolar de precisión-25cm- Bloqueo	
ABD02S-LV	Disector bipolar de precisión-25cm-Bloqueo/ Ajustable	

▶ Porta Agujas



ANH01-L	Porta agujas-38cm- Bloqueo	12 mm
ANH01-LV	Porta agujas-38cm-Bloqueo/ Ajustable	
ANH01S-L	Porta agujas-25cm- Bloqueo	
ANH01S-LV	Porta agujas-25cm-Bloqueo/ Ajustable	

* Todos los instrumentos disponibles con la opción de ajuste con velcro.


LIV'SMED

ARTISENTIAL
Instrumentos Laparoscópicos Articulado

/ Instrumentos ArtiSential®

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD PINZA
--------	-------------	----------------

► Porta Agujas de Precisión

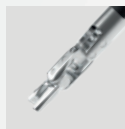

ANH02-L	Porta agujas de precisión-38cm- Bloqueo	9 mm
ANH02-LV	Porta agujas de precisión-38cm-Bloqueo/ Ajustable	
ANH02S-L	Porta agujas de precisión-25cm- Bloqueo	
ANH02S-LV	Porta agujas de precisión-25cm-Bloqueo/ Ajustable	

► Aplicador de Clips Medianos/Grandes



ACA01-L	Aplicador de clips Medium Large 38cm- Bloqueo	19 mm
ACA01-LV	Aplicador de clips Medium Large 38cm-Bloqueo/Ajustable	
ACA01S-L	Aplicador de clips Medium Large -25cm Bloqueo	
ACA01S-LV	Aplicador de clips Medium Large -25cm-Bloqueo/ Ajustable	

► Espátula Monopolar



AMT01-L	Espátula Monopolar-38cm- Bloqueo	5 mm
AMT01S-L	Espátula Monopolar-25cm Bloqueo	


► Anzuelo Monopolar



AMHD01-L	Hook monopolar abajo-38cm-Bloqueo	8 mm
AMHD01S-L	Hook monopolar abajo-25cm-Bloqueo	
AMHL01-L	Hook monopolar izquierda-38cm-Bloqueo	
AMHL01S-L	Hook monopolar izquierda-25cm-Bloqueo	
AMHR01-L	Hook monopolar derecha-38cm-Bloqueo	
AMHR01S-L	Hook monopolar derecha-25cm-Bloqueo	
AMHU01-L	Hook monopolar arriba-38cm-Bloqueo	
AMHU01S-L	Hook monopolar arriba-25cm-Bloqueo	

* Todos los instrumentos disponibles con la opción de ajuste con velcro.

/ Especificaciones ArtiSential®

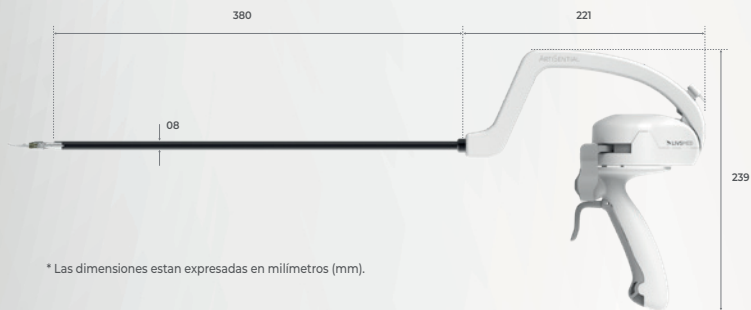

* Las dimensiones estan expresadas en milímetros (mm).

ARTISENTIAL
Instrumentos Laparoscópicos Articulados

LIV'SMED

BioSimil

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS

Buenos Aires

Av. Sta. Fé 3778 / Piso 3 / of. 304

CABA (C1425BGZ)

Central Tel. (54-11) 5.032.2974 / 4.897.2098

comercial@biosimil.com.ar

biosimil.com.ar